



JetCare Med by TavTech

Tretman obogaćen osmolitima za
revitalizaciju kolagena i elastina | Unapredite
rezultate svoje ordinacije

Formulisano za lekare, kreirano za rezultate.

JetCare Med by TavTech je ekskluzivna kolekcija JetPeel infuzionih preparata obogaćenih osmolitima, osmišljena za dermatologe i estetske stručnjake kako bi svojim pacijentima ponudili napredan JetPeel tretman za stimulaciju kolagena i elastina, sa klinički dokazanim rezultatima.

Liniju JetCare Med čine četiri infuzije i jedan „booster“ tretman:

- **JetCare Med Refill Infusion** – popunjavanje i zaglađivanje kože
- **JetCare Med Relight Infusion** – ujednačavanje tena i posvetljivanje
- **JetCare Med Relax Infusion** – opuštanje mišića lica
- **JetCare Med Revitalize Infusion** – anti-age delovanje
- **JetCare Med Refine Boost Infusion** – završni efekat podizanja i sjaja

Svi proizvodi iz JetCare Med linije formulisani su sa jedinstvenom i bogatom koncentracijom osmolit – organskih molekula male molekulske mase, koji deluju kao efikasni nosači za zaštitu peptida i očuvanje stabilnosti proteina, doprinoseći zdravijem i revitalizovanom kolagenu i elastinu.


Infuzije se primenjuju pomoću MDJet by TavTech nastavka, specijalno dizajniranog za JetPeel tretmane sa JetCare Med serumima. Preparati su upakovani u špriceve od 5 ml, koji se lako i brzo povezuju sa MDJet nastavkom, obezbeđujući praktičan i neprekinut tok tretmana.

JetCare Med: Rezultati govore sami za sebe

Klinička studija* sprovedena sa JetCare Med i JetPeel tretmanima pokazala je izuzetna poboljšanja gustine, čvrstine i elastičnosti kože.

Osam nedelja nakon prvog od ukupno tri tretmana, izvedenih u periodu od osam dana, ispitanici su pokazali**:

- **26% poboljšanja gustine kože**
- **16% poboljšanja čvrstine kože**
- **12% poboljšanja elastičnosti kože**

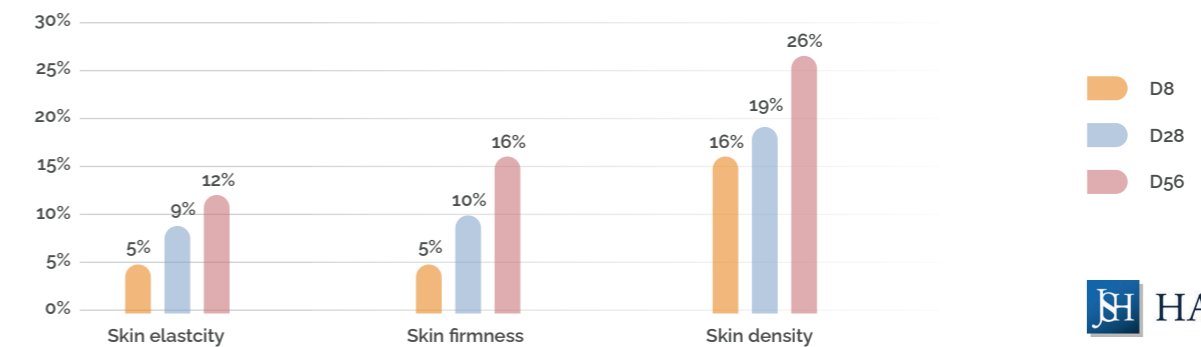

 HAMILTON

Svi tipovi kože pokazali su visoku toleranciju na proizvod, potvrđujući bezbednost i efikasnost JetCare Med tretmana u kombinaciji sa JetPeel-om.


Uz JetCare Med, nikada nije bilo jednostavnije pružiti klinički dokazanu, prijatnu JetPeel negu koja ostavlja kožu osveženom, blistavom i negovanom.

*Izvor: JS Hamilton, Izveštaj br. 416345-1/24/GDA/PK

Skin Density Improvements

Measured with Dub® Skin Scanner manufactured by TPM Taberna Pro Medicum GmbH

JS HAMILTON REPORT No. 416345-1/24/GDA/PK | JETCARE MED TREATMENT

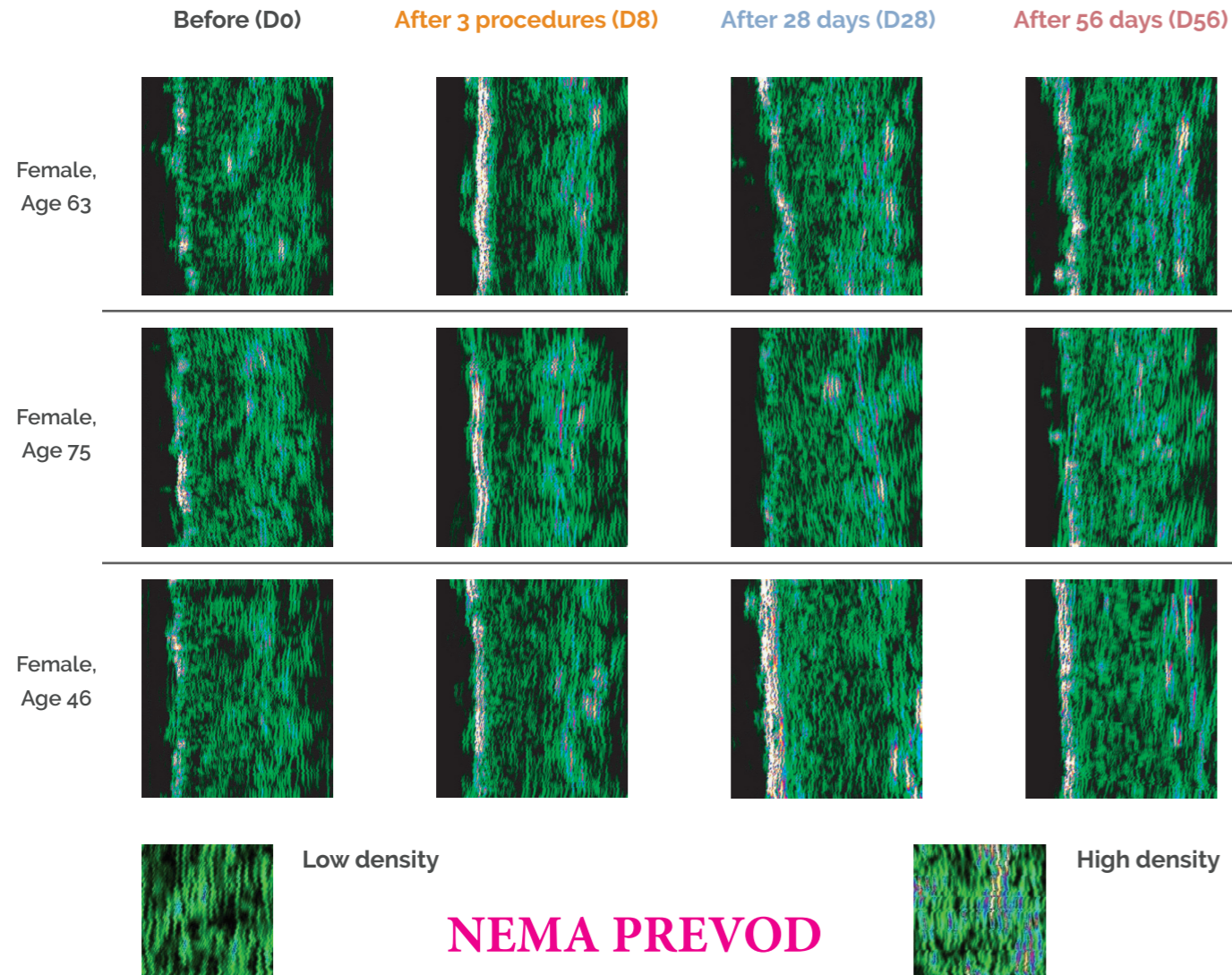

JetPeel + JetCare Med Snaga u službi vaše ordinacije

JetPeel by TavTech iskustvo zasniva se na tri ključna elementa:

1. JetPro by TavTech uređajima koji koriste energiju pritiska,
2. originalnim JetPeel nastavcima,
3. i JetCare by TavTech tečnim kozmetičkim rešenjima – jednim proizvodima koji garantuju vrhunske JetPeel rezultate.

Sa JetCare Med linijom, dermatolozi i estetski stručnjaci mogu unaprediti svoju ponudu JetPeel tretmana infuzijama nove generacije, laboratorijski potvrđenim, idealno prilagođenim radu u medicinskom okruženju. Povećajte potencijal svog JetPro uređaja uz JetCare Med infuzije i MDJet nastavak, obogaćujući JetPeel iskustvo i rezultate.

MDJet by TavTech nastavak – jednostavno revitalizujuće

MDJet je ekskluzivni JetPeel nastavak posebno dizajniran za JetCare Med tretmane.

Infuzije iz JetCare Med linije dolaze u špricovima od 5 ml, koji se direktno povezuju sa MDJet nastavkom. Za lekare i terapeute, rad sa MDJet nastavkom je gladak i jednostavan – špric se zavrće na nastavak, a zamena novim se obavlja u svega nekoliko sekundi.

JetCare Med pruža neprekinut tok tretmana i efikasnije izvođenje, kako za vas, tako i za vaše pacijente.



JetCare Med by TavTech

Snaga u službi vaše ordinacije

Predstavljamo JetCare Med – kolekciju visoko koncentrovanih infuzija za izuzetne estetske rezultate u vašoj ordinaciji i glatku, vidljivo osveženu kožu vaših pacijenata.

Svi proizvodi JetCare Med linije sadrže preko 5,5% osmolita – organskih molekula male molekulske mase, koji hidriraju i štite proteine, pružajući naprednu revitalizaciju kolagena i elastina.

Osmoliti u JetCare Med formulama deluju sinergijski, a među njima se ističu:

Betaine

Dobijen iz neprerađene šećerne repe bez GMO-a, visokoprečišćen betain je prirodni humektant koji jača barijeru kože, održava ravnotežu vlage i pruža dugotrajnu hidrataciju.

Xylitol

Prebiotski ovlaživač koji poboljšava mikrobiom kože, jača zaštitnu barijeru i obezbeđuje snažnu hidrataciju.

Inositol

Prirodni izomer glukoze i izvor energije za kožu, poboljšava metabolizam fibroblasta, povećava oksigenaciju, elastičnost i smanjuje znakove umora.

Formule takođe sadrže **propanediol** – 100% biljni glikol dobijen održivom proizvodnjom iz kukuruznog šećera, koji dodatno hidrira i umiruje kožu.

JetCare Med Series

Re-ignite your clinic results with osmolyte-enriched collagen and elastin energizers for clinically proven improved skin elasticity, skin firmness and skin thickness

Refill
+ Refine



Relax
+ Refine



Revitalize
+ Refine



Relight
+ Refine



JetCare Med Refill

Infuzija za popunjavanje kože, ublažavanje finih linija i opuštanje mišića lica, koja podstiče prirodni kolagen i vraća koži čvrstinu, ujednačenost i mladalački izgled. Savršena alternativa filerima, pruža prirodan efekat punije i glatke kože.

Pored jedinstvene kombinacije osmolit i propanediola, formula sadrži:

BioPeptide CL – 5%

Anti-age tripeptid kolagenskog lanca koji stimulise i osnažuje kolagen, jača epidermis i poboljšava strukturu kože.

Argireline® Amplified Peptide Solution C – 5%

Peptid nove generacije koji usporava prirodni proces starenja u epidermalnim slojevima, istovremeno opuštajući mišiće lica za glatkiji, ujednačeniji izgled.

Feminage – 2%

Sastojak koji štiti elastičnost kože, čuva vezu između dermisa i epidermisa i ublažava posledice oksidativnog stresa.

PrimalHyal™ UltraFiller

Patentirani derivat hijaluronske kiseline koji prodire dublje, stimulise ćelijski metabolizam, održava vlagu i smanjuje izražene linije.

PrimalHyal™-3K

Mešavina hijaluronske kiseline sa tri različite molekulske mase, koja deluje na različitim nivoima kože:

- 100–300 kDA: podržava prirodne procese regeneracije i jača odbrambeni mehanizam kože.
- 20–50 kDA: poboljšava tonus i čini kožu zategnutijom.
- 5–20 kDA: dopire do dubljih slojeva, obnavlja i osvežava kožu iznutra.



JetCare Med Relight

JetCare Med Relight je posvetljujuća infuzija bogata vitaminom C koja pomaže u osvetljavanju tena i štiti od efekata slobodnih radikala i UV oštećenja koji mogu da naruše blistavost kože.

Sa JetCare Med Relight tretmanom, koža dobija osećaj revitalizacije – postaje svetlija, blistavija i ujednačenog tona.

Pored jedinstvene mešavine osmolita i propanediola, formula JetCare Med Relight sadrži:

Ascorbyl Glucoside AA2G – 5%

Stabilan derivat vitamina C koji posvetljuje kožu, pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, inhibira sintezu melanina i podstiče proizvodnju kolagena. Takođe štiti od oštećenja izazvanih UV zracima, pružajući snažan efekat posvetljivanja i zaglađivanja.



JetCare Med Relax

JetCare Med Relax je formulisan da opusti mišiće, doprinosi glatkoj teksturi kože i ujednačenom izgledu tena. Obogaćen umirujućim, hidratantnim sastojcima i peptidima protiv starenja, predstavlja idealan tretman za vraćanje opuštenog, mladalačkog izgleda.

Pored jedinstvene mešavine osmolita i propanediola, formula JetCare Med Relax sadrži:

Argireline® Amplified Peptide Solution C – 10%

Peptid nove generacije sa višestrukim delovanjem, koji usporava prirodan proces starenja u epidermu, istovremeno opuštajući mišiće lica za glađi i ujednačeniji izgled.

(Argireline® je registrovani zaštitni znak kompanije Lipotec S.A. ili njenih filijala)

Neutrazen™ – 2.5%

Napredni neurokozmetički biomimetički lipopeptid, baziran na tri aminokiseline, sa snažnim umirujućim dejstvom – formulisan da smiri iritiranu kožu i spreči inflamaciju.

Allantoin

Ekstrakt korena gaveza koji hidrira, blago eksfolira i zaglađuje površinu kože, vraćajući joj prirodan sjaj. w.

Dipotassium Glycyrrhizate

Anti-inflamatorni sastojak dobijen iz korena sladića, koji pomaže regulaciji sebuma i umirivanju kože.



JetCare Med Revitalize

JetCare Med Revitalize je tretman bogat peptidima protiv starenja, posebno formulisan za zrele i osetljivu kožu. Kombinacija sastojaka za zaglađivanje bora i regeneraciju pruža snažan efekat podmlađivanja i obnove.

Pored jedinstvene mešavine osmolita i propanediola, formula JetCare Med Revitalize sadrži:

Matrixil® 3000 – 10%

Moćna dvostruka kombinacija peptida sa anti-age dejstvom, koja poboljšava tonus i elastičnost kože. Bogata matrikinima koji podstiču efikasnu reparaciju i regeneraciju kože.



JetCare Med Refine

Kao završni korak tretmana, JetCare Med Refine infuzija pruža snažan efekat zatezanja i blistavosti. Bazirana na naprednoj kombinaciji biljnih ekstrakata, vitamina i JetCare Med koktela osmolita, ova formula trenutno osvežava kožu i pojačava sjaj nakon JetPeel tretmana.

Pored jedinstvene mešavine osmolita i propanediola, formula JetCare Med Refine sadrži:

Detoxi-Look® – 3%

Hidratantni kompleks na bazi biljaka smilja i bele rade, bogat flavonoidima, polifenolima i saponinima, koji detoksikuje enzimatski sistem i reguliše mikrocirkulaciju, smanjujući crvenilo i pojačavajući prirodan sjaj kože.

Keratoline C

Enzimatski eksfolijant na bazi proteaza koji uklanja mrtve ćelije i podstiče obnavljanje, ostavljajući kožu glatkom i osveženom.






D-Panthenol – 1.8%

Vitamin B5 sa dubokim hranljivim dejstvom, koji zadržava vlagu, jača prirodnu barijeru kože i štiti je od spoljašnjih uticaja i starenja, za blistav i hidriran izgled.








JetCare Med Treatment Recommendations and Guidelines

Anti-Aging Treatment for all Skin Types

	LYMPHATIC MASSAGE	STEP 01	EXFOLIATION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOST INFUSION	STEP 04
 Handpiece	TripleJet		TripleJet		MDJet		MDJet	
 Distance from skin	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Handpiece Angle	90°		90°		90°		90°	
 Time	10-15 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes	
1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
2nd Treatment 7-10 days after 1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
3rd Treatment 7-10 days after 2nd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Refill		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
4th Treatment 7-10 days after 3rd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Revitalize		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
5th Treatment 7-10 days after 4th Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
Maintenance Every 6-8 weeks	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
 Remarks			Leave on skin for 5-8 min. then wash with ~8ml of JetCare Hydro. TripleJet handpiece at 45° - 60°					






JetCare Med Treatment Recommendations and Guidelines

Loss of Tone and Wrinkles Treatment for all Skin Types

	LYMPHATIC MASSAGE	STEP 01	EXFOLIATION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOST INFUSION	STEP 04
 Handpiece	TripleJet		TripleJet		MDJet		MDJet	
 Distance from skin	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Handpiece Angle	90°		90°		90°		90°	
 Time	10-15 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes	
1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
2nd Treatment 7-10 days after 1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Refill		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
3rd Treatment 7-10 days after 2nd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
4th Treatment 7-10 days after 3rd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Revitalize		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
5th Treatment 7-10 days after 4th Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
Maintenance Every 6-8 weeks	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
 Remarks			Leave on skin for 5-8 min. then wash with ~8ml of JetCare Hydro. TripleJet handpiece at 45° - 60°					






JetCare Med Treatment Recommendations and Guidelines

Post-Acne Treatments for all Skin Types

	LYMPHATIC MASSAGE	STEP 01	EXFOLIATION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOST INFUSION	STEP 04
 Handpiece	TripleJet		TripleJet		MDJet		MDJet	
 Distance from skin	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Handpiece Angle	90°		90°		90°		90°	
 Time	10-15 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes	
1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Refill		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
2nd Treatment 7-10 days after 1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
3rd Treatment 7-10 days after 2nd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
4th Treatment 7-10 days after 3rd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Revitalize		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
5th Treatment 7-10 days after 4th Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
Maintenance Every 6-8 weeks	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
 Remarks			Leave on skin for 5-8 min. then wash with ~8ml of JetCare Hydro. TripleJet handpiece at 45° - 60°					

JetCare Med Treatment Recommendations and Guidelines

Lightening and Pigmentation Treatments for all Skin Types

	LYMPHATIC MASSAGE	STEP 01	EXFOLIATION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOST INFUSION	STEP 04
 Handpiece	TripleJet		TripleJet		MDJet		MDJet	
 Distance from skin	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Handpiece Angle	90°		90°		90°		90°	
 Time	10-15 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes		5-7 minutes	
1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
2nd Treatment 7-10 days after 1st Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Relax		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
3rd Treatment 7-10 days after 2nd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Refill		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
4th Treatment 7-10 days after 3rd Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 10%		5ml syringe of JetCare Med Revitalize		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
5th Treatment 7-10 days after 4th Treatment	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
Maintenance Every 6-8 weeks	~18ml of JetCare Hydro		~5ml of Renewal Care Glycolic Acid 16%		5ml syringe of JetCare Med Relight		5ml syringe of JetCare Med Refine Boost Infusion	
 Remarks			Leave on skin for 5-8 min. then wash with ~8ml of JetCare Hydro. TripleJet handpiece at 45° - 60°					



Inovativna estetika

Klinike široom sveta

JetCare tečne formulacije koje su nastale 2021. godine stekle su svetsku reputaciju zahvaljujući izuzetnim efektima na kožu u okviru JetPeel tretmana.

TavTech, kreator JetCare linije, kontinuirano razvija i unapređuje kolekciju, uvodeći nove i napredne pristupe tretmanima. Nakon linija JetCare, JetCare Youth, JetCare Green i JetCare Ayurveda, TavTech je predstavio JetCare Med i nastavak inovacija – MDJet nastavak – novi pristup JetPeel tretmanu sa klinički dokazanim rezultatima.

Svaka JetCare kolekcija razvijena je kako bi zadovoljila potrebe dermatoloških i estetskih klinika, donoseći koži neprikosnovenu glatkoću i zdrav, blistav izgled.

Snaga u službi vaše ordinacije

JetPeel Trio

Sistem JetPeel koristi mlaznu energiju za trans-epidermalnu infuziju bogate kombinacije hranljivih sastojaka i rastvora, za tretman različitih estetskih i dermatoloških stanja.

Tretman se sastoji iz tri koraka:

1. Limfna masaža
2. Eksfolijacija
3. Trans-epidermalna infuzija

JetPeel sistem čine tri ključna elementa:

1. JetPro uređaji

Kompaktni, jednostavni za upotrebu, sa naprednom tehnologijom mlaznog pogona i opcijom LED terapije (JetPro Duo i Pro ToGo).

2. JetCare rešenja

Jedinstveni nutritivno bogati rastvori za različite potrebe kože.

2. JetCare nastavci

Patentirani nastavci sa različitim tipovima mlaznica, koji stvaraju mikrokanale kroz koje JetCare formule prodiru dublje, pojačavajući efekte tretmana.

Svake godine milioni ljudi širom sveta otkrivaju prednosti JetPeel tretmana

Potpuno bezbolnog, neinvazivnog i bez potrebe za oporavkom. Pogodan za sve tipove kože, u svako doba godine, pruža vidljive rezultate već nakon prve primene.



GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER:



N A M A S T E

www.studionamaste.rs

+381 11 409 56 49 • +381 69 265 64 99
namaste@studionamaste.rs

Hadži Melentijeva 32
11 000 Beograd
Srbija

www.jetpeelserbia.com

 [jetpeel_tavtech_serbia](https://www.instagram.com/jetpeel_tavtech_serbia)

 [jetpeeltavtechserbia](https://www.linkedin.com/company/jetpeeltavtechserbia)

 **JETPEEL**
by TavTech
Serbia

JETPEEL HANDPIECE
MDJet
Jet Pressure Energy
NOT STERILE

JetCare Med
RELIGHT
Osmolyte enriched
TREATMENTS
Relight Infusion
Refine Boost Infusion
5 syringes
5 syringes

JCM-RELIGHT BOX
5x1.0 cc • 5 syringes (1.0 cc) each
12.5 cc • 5 syringes (1.0 cc) each

 **JETCARE**
by TavTech